



# 3R80

## Одноосный гидравлический коленный модуль с контролем фазы переноса и опоры

- 1 Простая настройка — 3R80 предлагает четыре уровня настройки фазы опоры и переноса. Сопротивление сгибанию и разгибанию настраивается отдельно друг от друга.
- 2 Оптимальная настройка — амортизации фазы опоры и ответной реакции достигается с помощью плавного вращения колец настройки.
- 3 Резьбовой адаптер — позволяет использовать модуль при различных уровнях ампутации бедра.
- 4 Ручной замок — позволяет максимально комфортно чувствовать себя в любой жизненной ситуации.

### Преимущества

- Надежная и производительная ротационная гидравлика.
- Два варианта адаптера (пирамидка и резьба), высокий максимальный вес пациента 150 кг.
- Индивидуальная настройка под пациента с помощью руководства.
- В комплект поставки включены дополнительная пружина, несущий модуль из титана, ключ для настройки.
- Гидравлический контроль фазы переноса позволяет ходить с разными скоростями.
- Гидравлический контроль фазы опоры делает возможным подгибание под нагрузкой – важно при спуске по ступенькам и наклонной поверхности.
- Поддержка при приседании, снятие нагрузки с здоровой конечности благодаря сопротивлению сгибания в фазе опоры
- Большой угол сгибания 150°.
- Водостойчивая конструкция, для использования в пресной и соленой воде.
- Ручной замок, для безопасности на мокрых поверхностях и длительного стояния.

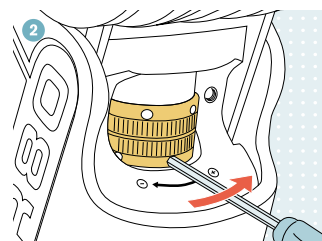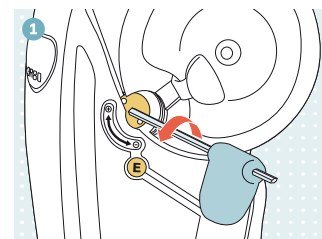

### Техническая информация

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Уровень активности               | 3-й и 4-й уровень активности   |
| Макс. вес пациента               | 150 кг   |
| Область применения               | Ампутация бедра, ампутация бедра с длинной культей   |
| Соединение в проксимальной части | Адаптер пирамидка (3R80)<br>Резьбовой разъем (3R80ST)  |
| Соединение в дистальной части    | Зажимной хомут d=34 мм   |
| Макс. угол сгибания              | 150°   |
| Вес                              | 1225 г (версия с пирамидкой)   |
| Системная высота                 | 163 мм (версия с пирамидкой)   |
| Рекомендуемые компоненты         | Стопы 1C10 Terion, 1D35, 1C30, 1C40, 1C60, 1C61, 1C63, 1C64                                    |
| Объем поставки                   | Несущий модуль 2R58 (титан) d=34 мм, более жесткая пружина толкателя, руководство по настройке |