

# Активная кресло-коляска Motus CV



# Мотус CV

## Универсальный



Мотус CV соединяет в себе высокие технологии и яркий дизайн. Устойчивый и надежный, он хорошо подходит для активного использования в повседневной жизни и отличается удобством в управлении. Широкий выбор возможностей оснащения и параметров позволяет оптимально адаптировать кресло-коляску в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя.

Мотус CV оснащен откидывающимися, съемными подножками с регулируемым углом наклона опор для стоп. Точная настройка центра тяжести кресла-коляски обеспечивает ее мобильность и устойчивость. Эргономичная спинка с регулировкой натяжения создает для пользователя комфорт и продлевает срок службы спинки. Обивка выполнена из дышащего материала.

## Характеристики базовой комплектации

- Рама дюралюминиевая, складная
- Съемные, отводящиеся внутрь и в стороны подножки с опорами для стоп, регулируемые по углу наклона
- Регулировка глубины сиденья, 2 см
- Адаптер приводного колеса имеет широкий диапазон регулировок
- Ручка тормоза на уровне колена
- Спинка с регулировкой по высоте, 5–10 см
- Обшивка спинки с регулировкой натяжения
- Боковые панели с защитой для одежды
- Приводные колеса быстросъемные, 24 дюйма
- Покрышки приводных колес пневматические, 1 дюйм
- Передние колеса пневматические, 7 дюймов
- Ремни для поддержки голеней
- Подушка противопролежневая, 5 см



- Держатели подножек отводятся наружу или вовнутрь, быстросъемные, что упрощает пересаживание пользователя, позволяет подъезжать ближе к столу и другим предметам мебели



- Каркас спинки с возможностью настройки по высоте обеспечивает стабильность и адаптивность под нужды пользователя

Технические характеристики	
Ширина сиденья	от 35,5 до 55,5 см с шагом в 2,5 см
Глубина сиденья	от 36 до 54 см с шагом в 2 см
Высота сиденья от пола спереди*	42–52 см
Высота сиденья от пола сзади*	36–52 см
Длина подножки	34–52 см
Высота спинки	30–50 см
Цвет обшивки	серый с зелеными вставками
Максимальная нагрузка:	до ширины сиденья 48 см;
	от ширины сиденья 50,5 см
Вес	от 15 кг
Цвет рамы	антрацит металлик

\* Диапазон зависит от типа вилки переднего колеса и размера передних и задних колес

## Дополнительные опции<sup>1</sup>

- Транзитные колеса для проезда в узких проходах
- Тростедержатель
- Антипрокидыватель левый / правый, легко приводимый в рабочее положение и отводящийся под сиденье
- Различные типы и размеры передних и задних колес
- Развал колес 0°; 1°; 2,5°; 3,5°
- Привод для управления одной рукой
- Обода прорезиненные, титановые и другие виды
- Спинка с регулировкой угла наклона до 30°
- Спинка «Backster»
- Боковые поддержки туловища
- Ручки для сопровождающего лица телескопические и другие виды
- Подлокотники с регулировкой высоты
- Различные типы противопрележных подушек
- Подножки с регулировкой угла наклона и при ампутациях нижних конечностей
- Колпаки защитные на спицы
- Тазовый ремень
- Различные цвета рамы
- Лыжи на передние колеса Wheel blades
- Рюкзак



- Раздельные опоры для стоп, выполнены из прочного композитного материала, легкие, устойчивые, с противоскользящим эффектом. Угол наклона можно настроить под положение стоп, необходимое пользователю



- Пошаговое изменение угла наклона спинки до 30° (4 положения) производится без применения инструмента, что позволяет пользователю отдыхать, когда появляется в этом потребность

<sup>1</sup>Требуется уточнение совместимости опций и аксессуаров.





- Тазовый ремень с металлической пряжкой обеспечивает надежное положение пользователя в кресле и предотвращает соскальзывание



- Настройки вилки переднего колеса используются в тех случаях, когда необходимо изменить высоту сиденья спереди, например, для пользователя с большим ростом



- Наличие столика создает пользователю условия для выполнения упражнений, работы или приема пищи. Загнутый вверх край у столика предотвращает случайное падение предметов



- Полиуретановые шины с защитой от проколов не требуют постоянного контроля давления воздуха



- Боковые панели с защитой для одежды, изготовлены из алюминия, предотвращают попадание грязи и брызг на одежду пользователя. Неопреновые вкладки защищают от переохлаждения при контакте с боковиной



- Подушка на сиденье Combi 3S состоит из нескольких слоев. Их комбинация обеспечивает комфортное сидение и значительный противолежневый эффект. Воздухопроницаемый материал обшивки позволяет коже дышать

# Цвета рамы

**Красный металлик**  
(Pure metal red)



**Красный перламутровый**  
(Candy red)



**Бронзовый металлик**  
(Pure metal bronze)



**Оранжевый перламутровый**  
(Sparkle light orange)



**Малиновый перламутровый**  
(Dormant Vinho Sparkle)



**Зеленое яблоко**  
(Dormant apple green)




**Зеленый металлик**  
(Pure metal green)



**Морской синий**  
(Dormant marine blue)



**Небесно-синий перламутровый**  
(Dormant sky blue)

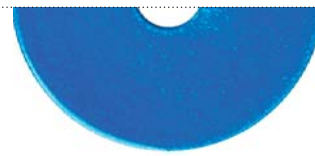

**Синий металлик**  
(Pure metal blue)



**Серо-голубой**  
(Ice blue)



**Белый перламутровый**  
(White pearl)



**Серебряный бриллиант**  
(Brilliant silver)



**Антрацит металлик**  
(Anthracite metallic)



**Черный**  
(Jet black RAL 9005)



**Черный матовый**  
(Deep black matte)



**Радужный металлик**  
(Rainbow)

